

## Divan d'examen électrique Quest système Block'n Roll et dossier à gaz PROMOTAL

Divan d'examen Quest de PROMOTAL électrique équipé du système Block'n Roll.



**Marque :** PROMOTAL

**Référence :** 2050-15

**Prix :** 2470.00€

### Options disponibles :

*Modèle sellerie :* Sellerie plate 65, Sellerie plate 75 (+ 154.00€), Sellerie à bourrelets 65 (+ 210.00€), Sellerie à bourrelets 75 (+ 307.00€), Sellerie anatomique 73 (+ 454.00€)

*Couleur :* Bleu, Cottage, Rouge, Jaune, Blanc, Marine, Obscure, Raisin, Lagon, Bonbon, Cedrat, Ciel, Vert, Lilas, Etain, Gris souris, Naturel, Chocolat

*Choix de la livraison :* Livraison gratuite (pas de porte), Livraison et installation RDC, Livraison et installation étage

### Description

Divan Quest système Block'n Roll et dossier à gaz PROMOTAL  
Divan d'examen électrique PROMOTAL - Mobilier médical



**Paiement  
3X sans frais CB**

Le divan d'examen électrique Quest de PROMOTAL est un divan d'examen performant qui vous propose une hauteur variable de 46cm à 92cm en commande manuelle.

Il possède le système Block'n Roll, des roulettes escamotables intégrées, qui permet de passer des roulettes aux patins simplement en appuyant sur les pédales.

Avec un mouvement électrique très doux, le confort du patient est garanti. L'ensemble des éléments du divan Quest est pensés pour faciliter le quotidien du praticien, ainsi que le confort de ses patients. Il est équipé d'un piètement en H, ce qui permet d'assurer **une grande stabilité**. Le divan d'examen peut accueillir des patients **jusqu'à 200kg**. Il est équipé d'un **dossier qui est réglable par vérin à gaz**.

Hauteur variable électrique de 54 à 94cm Dossier est réglable Commande manuelle ou au pied, Capacité d'accueil de 200kg Support pour rouleau drap d'examen Structure est en acier avec des finitions époxy gris nuage Sellerie non-feu M1. Livré avec un porte-rouleau adapté

Le divan d'examen électrique Quest PROMOTAL existe en modèles : Quest système patins et dossier à gaz - 2050-10 Quest système Block'n Roll et dossier à gaz - 2050-15 Quest système patins proclive/déclive et dossier à gaz - 2050-20 Quest système Block'n Roll proclive/déclive et dossier à gaz - 2050-30 Quest système Block'n Roll proclive/déclive et dossier électrique - 2050-50

Afin de vous apporter un équipement sur mesure, vous pouvez choisir le type de sellerie qui vous convient le mieux.

Différents modèles de sellerie disponibles pour le Divan Quest : Sellerie plate 65 - Sellerie plate - Largeur 65cm Sellerie plate 75 - Sellerie plate - Largeur 75cm Sellerie à bourrelets 65 - Sellerie à bourrelets - Largeur 65cm Sellerie à bourrelets 75 - Sellerie à bourrelets - Largeur 75cm Sellerie anatomique 73 - Sellerie anatomique - Largeur 73cm (divan en photo)

Afin d'adapter au mieux votre divan d'examen Quest à votre cabinet, le divan est disponible en plusieurs couleurs.

**Garantie : 2 ans hors sellerie**

**Gagnez une année de garantie supplémentaire grâce à Mat Médical France :**

Opération 2 + 1 : 2 années de garantie + 1 année gratuite

Pour bénéficier de cette extension de garantie gratuite,

enregistrez votre achat sur [www.promotal.com](http://www.promotal.com) Cliquez sur "espace garantie" Renseignez le formulaire correspondant

Le Divan électrique Quest PROMOTAL est disponible en couleur :

Classic



Bleu Cottage Rouge Jaune Blanc

Vitamin



Marine Obscure Raisin Lagon Bonbon

Cosy



Cedrat Ciel Vert d'eau Lilas Etain



Gris Souris Naturel Chocolat

Vidéo d'utilisation du Divan d'examen électrique Quest PROMOTAL :




**Pour les prestations de livraison : la livraison gratuite se fait "pas de porte".**

**Le forfait livraison et installation vous garantit une prestation de livraison et un montage de qualité (étage, etc..).**

### Fiche technique

Caractéristiques du divan d'examen Quest à hauteur variable PROMOTAL : Hauteur variable électrique de 54 à 94cm Dossier réglable par vérin à gaz ou vérin électrique Commande manuelle ou au pied Patins de réglage sous piètement ou Système de roulettes escamotables intégrées semi-centralisé Block'n Roll® Capacité de charge jusqu'à 200kg Support rouleau papier (longueur maxi 50cm – ø 12,5cm) 12cm de dégagement au sol compatible avec le passage d'un lève-personne Structure acier avec finition époxy gris nuage

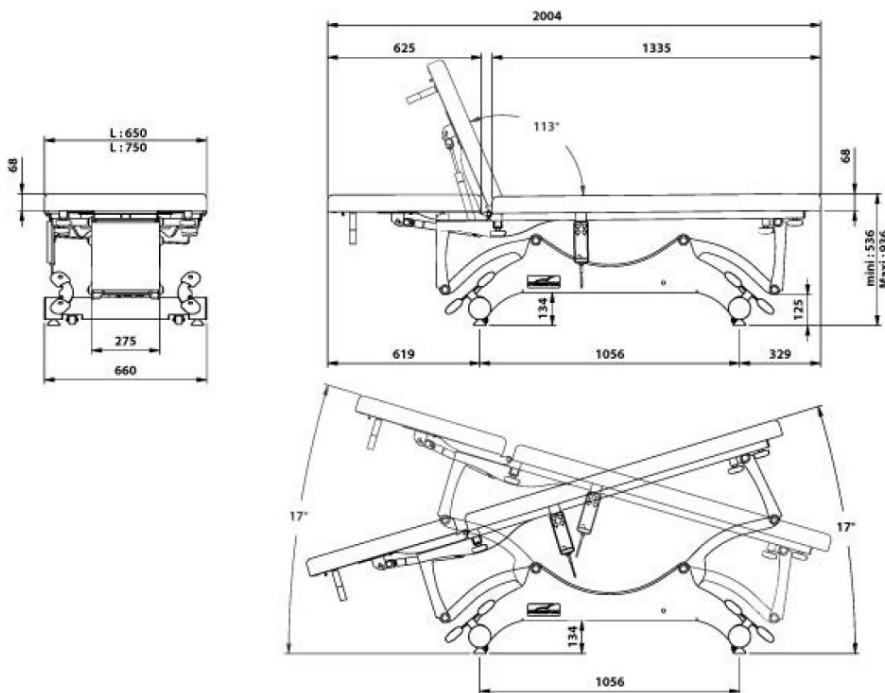


### Télécharger la Fiche Technique

Image not found or type unknown



### Manuel d'utilisation

Image not found or type unknown

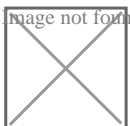

[Lien vers la fiche du produit](#)