

## Electrocardiographe Cardiomate 3 pistes SPENGLER

L'Electrocardiographe Cardiomate 3 pistes SPENGLER est un ECG 3 pistes doté d'un écran couleur. Simple d'utilisation, l'enregistrement et l'impression de l'ECG sont déclenchés avec une seule touche.



**Marque :**SPENGLER

**Référence :**260003

**Prix :**1230.00€

### Options disponibles :

*Nomenclature :* Electrocardiographe ECG 3 pistes Cardiomate, Cable patient pour ECG Cardiomate (- 1142.00€), Règle ECG (- 1293.00€)

### Description

Electrocardiographe ECG 3 pistes Cardiomate 3 SPENGLER :



**Paiement**  
**3X sans frais CB**

Electrocardiographe ECG 3 pistes Cardiomate SPENGLER

L'Electrocardiographe ECG 3 pistes Cardiomate SPENGLER, est un ECG robuste et fiable. Doté d'un écran couleur 7" inclinable, il permet la visualisation des 12 dérivations simultanément. Simple d'utilisation, l'enregistrement et l'impression de l'ECG sont déclenchés avec une seule touche.

L'**ECG Cardiomate 3** est pourvu des dernières technologies de stockage et de communication (Carte SD, USB, réseau) pouvant enregistrer en interne jusqu'à 10 000 ECG, les envoyer sur un ordinateur (logiciel en option) ou directement à une imprimante externe.

La batterie interne, d'une autonomie de 3h, la légèreté et la poignée de transport font de l'électrocardiographe Cardiomate 3 de Spengler le compagnon idéal en cabinet médical ou en déplacement.

L'**ECG Cardiomate 3** dispose de :

Ecran couleur 7 pouces inclinable 12 dérivationes interprétation automatique détection de pacemaker enregistrement 10 000 ECG

Electrocardiographe ECG 3 pistes Cardiomate SPENGLER est livré avec : Electrocardiographe ECG 3 pistes Cardiomate Un câble patient Quatre électrodes d'extrémité (pinces) Six électrodes thoraciques (ventouses) Un câble d'alimentation Un rouleau de papier thermique Une carte SD de 4 Go d'utilisation Un manuel d'utilisation

Options disponible pour l'electrocardiographe ECG 3 pistes Cardiomate SPENGLER : Cable patient pour ECG Cardiomate Règle ECG


Papier d'enregistrement pour ECG Cardiomate : [cliquez ici](#)

Garantie : 2 ans



### Fiche technique

Caractéristiques techniques de Electrocardiographe ECG 3 pistes Cardiomate SPENGLER : 12 dérivationes standards Enregistrement : Automatique (3CH, 1CH+1R), Manuel (3CH, 1CH+1R, 1CH), Rythme (Toutes pistes au choix) Protection intégrée contre les défibrillateurs Imprimante thermique Acquisition de 12 dérivationes simultanées Papier d'enregistrement : Rouleau 80mm × 20m Plage de mesure ± 5mVpp Vitesse d'enregistrement : 5 mm/s, 6.25mm/s, 10 mm/s, 12.5 mm/s, 25 mm/s, 50mm/s Constante de temps ? 3.2s Écran LCD 7 pouces - 800×480 pixels Fréquence de réponse 0.05Hz~150Hz (-3dB) Interface réseau, USB et carte SD Sensibilité 2.5, 5, 10, 20 mm/mV Norme de sécurité IEC 1/CF Impédance d'entrée ? 50M? Fréquence d'échantillonnage : 1000hz par canaux & 10 000Hz avec pacemaker Courant circuit d'entrée < 0.05µA Alimentation : AC (100~240V, 50/60Hz, 30VA~100VA), DC (14.8V/2200mAh, batterie lithium intégrée) Atténuation du bruit < 15µVp-p Autonomie de la batterie : Fonctionnement normal 5 heures, Impression en continu 3 heures Filtre EMG : 25 Hz / 30 Hz / 40Hz - Filtre DFT : 0.05 Hz / 0.15 Hz / 0.25 Hz / 0.32 Hz / 0.5 Hz / 0.67Hz/ ADS Filtre : AC 50 / 60Hz - Filtre passe-bas : 75 Hz / 100 Hz / 150Hz

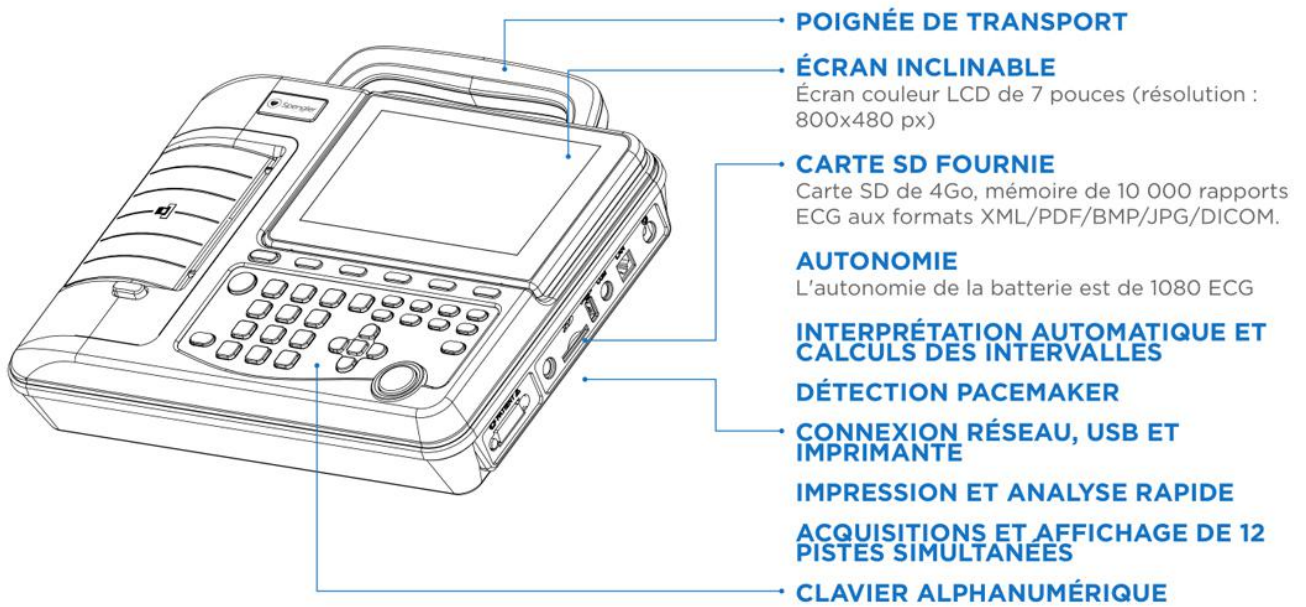

**Télécharger la Fiche Technique**



**Déclaration de conformité**



**Certificat de conformité**



[Lien vers la fiche du produit](#)