

Electrostimulateur Compex Pro Theta CEFARCOMPEX

Electrostimulateur Compex Pro Theta CEFARCOMPEX adapté aux kinésithérapeutes et physiothérapeutes.



Marque : CEFARCOMPEX

Référence : 2534810

Prix : 699.00€

Description

Electrostimulateur Compex Pro Theta CEFARCOMPEX :Electrostimulateur Compex Pro Theta CEFARCOMPEX

L'Electrostimulateur Compex Pro Theta CEFARCOMPEX est adapté aux kinésithérapeutes et physiothérapeutes soucieux d'intégrer l'électrothérapie dans leur gestion quotidienne des soins. Il permet la prise en charge d'indications et protocoles spécifiques.



**Paiement
3X sans
frais CB**

L'**Electrostimulateur Compex Pro Theta CEFARCOMPEX** propose la technologie révolutionnaire Muscle Intelligence, fonctions automatiquement activées lorsque le câble Mi-Sensor est connecté. Ce stimulateur 4 canaux a été développé pour une prise en charge à la fois standard (Stimulation Neuromusculaire, Douleur), mais aussi des protocoles de rééducation spécifiques lorsque des contractions volontaires contrôlées (Trigger) ou décalées sont nécessaires.

Fonction Muscle intelligence : Mi-Scan, Mi-Tens, Mi-Range (en option en connectant un Mi-sensors) Stylet Point Moteur: permet de détecter les points moteur indiquant le positionnement optimal des électrodes
Fonction Trigger : Déclenche volontairement et de façon contrôlée la stimulation Configuration des

programmes : Full Fréquence : 1-150 Hz Intensité maximale : 120 mA Largeur d'impulsion : 30-400 μ s

Les indications de type Neurologie (Spasticité, Dorsiflexion du pied de l'hémiplégique, Agoniste-Antagoniste) ou des protocoles spécifiques comme stimulation post ligamentoplastie LCA sont proposés par l'appareil.

Le kit Electrostimulateur Compex Pro Theta CEFARCOMPEX contient : Stimulateur Compex Pro Theta Chargeur rapide Batterie haute énergie Set de 4 câbles Fil Adaptateur Snap-Fil Câbles Mi-sensor Housse de protection Sachets d'électrodes (5x5 cm 1 snap) Sachets d'électrodes (5x10 cm 2 snap) Manuel d'utilisation et guide pratique sur CD/USB Guide de démarrage rapide et avertissements Guide de positionnement des électrodes Flacon de gel 250 ml Stylet point moteur Housse de transport Clip ceinture

Garantie : 3 ans




Fiche technique

Caractéristiques techniques de l'Electrostimulateur Compex Pro Theta : Nombre de canaux : 4 indépendants ajustables individuellement Forme d'impulsion : Courant constant rectangulaire 100% compensé Intensité maximale : 120 mA Incréments d'intensité : Ajustement manuel de la stimulation de 0 à 999 (unité d'énergie) avec incrément minimum de 0.25 mA Largeur d'impulsion : 30-400 μ s Charge électrique maximale par impulsion : 96 micro coulombs ($2 \times 48 \mu$ C, compensé) Fréquence : 1-150 Hz Batterie 941213 : Nickel métal hydride (NiMH) batterie rechargeable (4.8 V 2000 mA/h).

Télécharger la Fiche Technique

Image not found or type unknown

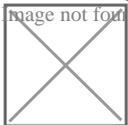

[Lien vers la fiche du produit](#)