

Fauteuil Releveur électrique Cocoon confort INNOV'S.A.

Fauteuil releveur électrique Cocoon INNOV'S.A. avec accoudoirs escamotables, confortable, élégant et fonctionnel, de fabrication française



Marque : INNOV'S.A.

Référence : CRLV_45_L44CHCO

Points de fidélité offerts : 500

Prix : 879.00€

Options disponibles :

Couleur au choix : Taupe, Chocolat, Framboise, Grège, Marron, Réglisse, Gris, Marron chiné

Dimension : Largeur : 44 cm - Profondeur 45 cm - Hauteur 52 cm, Largeur : 44 cm - Profondeur 55 cm - Hauteur 52 cm, Largeur : 50 cm - Profondeur 45 cm - Hauteur 52 cm, Largeur : 50 cm - Profondeur 55 cm - Hauteur 52 cm, Largeur : 44 cm - Profondeur 45 cm - Hauteur 45 cm (+ 100.00€), Largeur : 65 cm - Profondeur 55 cm - Hauteur 52 cm (+ 508.00€)

Accessoires : Fibres creuses siliconées, Mousse haute densité HR35 (+ 60.00€)

Choix de la livraison : Livraison gratuite (pas de porte), Livraison et installation à domicile (+ 118.80€)

Description

Fauteuil releveur Cocoon confort INNOV'S.A. Le fauteuil releveur confortable et fonctionnel - Fabriqué en FRANCE



**Paiement
3X sans
frais CB**

Le **Fauteuil releveur Cocoon confort INNOV'S.A.** est un fauteuil releveur électrique de haute qualité, très **confortable, élégant et fonctionnel**. La housse du fauteuil est, selon votre choix, en polyuréthane compartimentée garnie de fibres creuses siliconées, en velours ou en simili agneau.

Le fauteuil releveur Cocoon 1 moteur propose 4 positions de confort

Le fauteuil releveur électrique Cocoon permet de s'asseoir et de se relever sans effort, dans sa version 1 moteur le dossier et le relève jambe se commande en même temps.

La **position assise** classique, La **position relax** : le dossier est légèrement incliné et vos jambes sont relevées. Cette position est idéale pour lire ou regarder la télévision, La **position repos**: vous êtes presque entièrement allongé, tout en conservant le dossier légèrement relevé, La **position releveur**, qui vous permettra d'entretenir votre autonomie. L'aide au transfert se fait en deux étapes : dans un premier temps, le **fauteuil releveur électrique Cocoon** s'élève, puis dans un second temps, il bascule vers l'avant. Ainsi, vous vous relevez sans effort.

Votre sécurité est également assurée grâce à la **fonction Stop and Start** qui permet d'effectuer une pause dans l'inclinaison.

Le **Fauteuil releveur Cocoon** est aussi disponible en [version 2 moteurs](#), ou sa [version nouvelle génération](#).

La télécommande du fauteuil Cocoon dispose deux boutons.

Elle est à positionner à gauche ou à droite, en fonction de vos besoins, et ne peut pas chuter car elle est placée sous le coussin d'accoudoir.

Le fauteuil releveur Cocoon allège les points de pression

En allégeant les points de pression, le **fauteuil releveur Cocoon** diminue les risques liés aux immobilités quotidiennes et prolongées. Ce qui permet la **prévention des escarres** .

L'**allègement des points de pression sur toutes les zones de contact**, moins de 120mm de pression correspond à une **efficacité proche du coussin classe II**.

Le Fauteuil Cocoon est équipé d'accoudoirs escamotables/amovibles. **Les accoudoirs du fauteuil** facilitent le **transfert latéral** et les **accès aux soins**.

Le Fauteuil releveur Cocoon INNOV'S.A. existe en : Polyuréthane Taupe Chocolat Pistache Framboise Velours Grège Marron Simili agneau Réglisse INDISPONIBLE SUR LE MODELE XS Tissu Gris Marron chiné INDISPONIBLE SUR LE MODELE EN XS ET XL Densité de l'assise au choix: Fibres creuses siliconés pour un confort moelleux Mousse haute densité HR35 (équivalent Classe III) pour une assise plus ferme

Les dimensions du fauteuil Cocoon :

Largeur : 44 cm - Profondeur 45 cm (Conseillé pour les personnes de moins de 1,65m) - Hauteur assise 52 cm
Largeur : 44 cm - Profondeur 55 cm (Conseillé pour les personnes de plus de 1,65m) - Hauteur assise 52 cm
Largeur : 50 cm - Profondeur 45 cm (Conseillé pour les personnes de moins de 1,65m) - Hauteur assise 52 cm
Largeur : 50 cm - Profondeur 55 cm (Conseillé pour les personnes de plus de 1,65m) - Hauteur assise 52 cm
Largeur : 44 cm - Profondeur 45 cm (**Conseillé pour les personnes de moins de 1,60m**) - **Hauteur assise 45 cm**
Largeur : 65 cm - Profondeur 55 cm (**Poids maximum utilisateur 220kg**) - Hauteur assise 52 cm

Options :

Porte-Revues **Tablette** **Kit Mobilité** **Kit soulève malade** **Oreiller Pillow** **coloris disponibles Velours Marron et Velours grège ou Simili Noir** **Protection de tête** Pour choisir vos options consultez la fiche article : [Options Fauteuil releveur Cocoon confort INNOV'S.A](#)

Vidéo du Fauteuil releveur Cocoon confort INNOV'S.A.

Le **fauteuil Cocoon** est classé **M1** et **M2** anti-feu (sauf velours et simili agneau) :

Revêtement facilement nettoyable (Housse escamotable).

Garantie pièce : 5 ans pour vérin électrique, hors main d'oeuvre

Garantie pièce : 5 ans pour la mécanique, hors main d'oeuvre

Garantie pièce : 2 ans pour la housse

Garantie pièce : 1 an pour la télécommande

Fabriqué en FRANCE

Retrouvez tout nos fauteuils releveurs à partir de 499€ [ici](#)!



Pour les prestations de livraison : la livraison gratuite se fait "pas de porte".

Le forfait livraison et installation vous garantit une prestation de livraison et un montage de qualité (étage, etc.).


L'installation à domicile est valable uniquement pour la FRANCE (hors Corse)

En cas de besoin merci de nous consulter.

Fiche Technique

Caractéristiques du Fauteuil releveur Cocoon INNOV'S.A : Poids du fauteuil : 47 kg Accoudoirs escamotables et housses lavable à 30 degrés. Poids maximum : 160 kg
Hauteur d'assise : 45 cm

Largeur d'assise réglable : 44 ou 50 cm Profondeur d'assise réglable : 45 ou 55 cm Revêtement polyuréthane PU conforme aux Normes Feu M1 Revêtement simili cuir conforme aux Normes Feu M2 Norme CEM/EMF (Marquage CE) EN 55014-1 EN55014-2 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3 EN 62233 Rapport Essai COFRAC

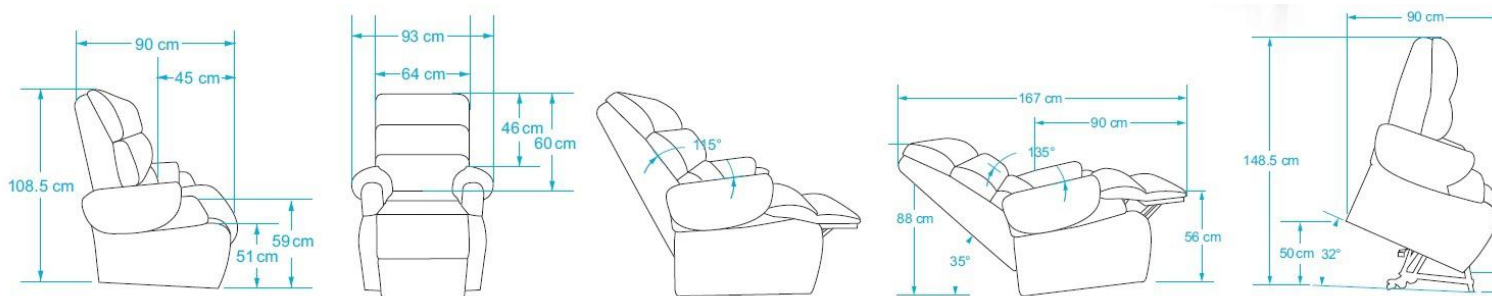

Couette Cocoon :

Housse polyuréthane compartimentée garnie de fibres creuses siliconées Allègement des points de pression du **fauteuil releveur électrique Cocoon** Accueil ultra moelleux

Modules de couettes lavables et/ou remplaçables :

Module couette dossier Module couette assise/repose-jambes Module couette accoudoirs

Télécommande sécurisée et réversible :


Chute de la télécommande impossible Fonction Stop & Start Arrêt automatique en position assis. Appuyer à nouveau sur le bouton pour passer en **position releveur**

Dimensions du carton lors de la livraison :

110 de haut 76 de large 90 de profondeur

Télécharger la Fiche Technique

Image not found or type unknown

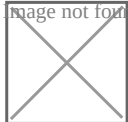

[Lien vers la fiche du produit](#)