

Tensiomètre électronique au bras M6 Comfort V4 OMRON

Tensiomètre électronique M6 Comfort OMRON avec système intellisense.



Marque : OMRON

Référence : OMR335

Prix : 109.00€

Description

Tensiomètre électronique au bras M6 Comfort V4 OMRON *Tensiomètre avec détecteur de mouvements et pulsations irrégulières.*

Le **Tensiomètre électronique au bras M6 Comfort V4 OMRON** est un **tensiomètre au bras entièrement automatique**, il est équipé d'un **détecteur de mouvements** ainsi que d'un **détecteur de pulsations irrégulières**.

Le système **intellisense** dont il est équipé permet une régulation et une adaptation automatique de la pression de gonflage nécessaire, sans aucun réglage au préalable.

Brassard préformé Mémoire : 100 mesures horodatées avec moyenne de 3 mesures, 2 utilisateurs possible
Validation clinique ESH Fourni avec trousse, piles (Pensez à vous équiper du [Chargeur pour tensiomètre M3 M6 OMRON](#))

Le **Tensiomètre électronique au bras M6 Comfort V4 OMRON** dispose d'un brassard adulte de 22 à 42 cm de circonférence.

Calcul des valeurs moyennes des pressions systolique, diastolique et du pouls, basé sur les 3 dernières mesures dans les 10 dernières minutes.

Ce modèle est un dispositif médical validé cliniquement et présent sur la liste de l'Agence Française de Sécurité Sanitaire des Produits de Santé (AFSSAPS)

Comment prendre sa tension artérielle?

Les règles pour mesurer la pression artérielle : pour en savoir plus, [cliquer ici](#)

Garantie : 3 ans

Vidéo du Tensiomètre électronique au bras M6 OMRON :

Fiche technique


Caractéristiques du Tensiomètre électronique au bras M6 Comfort OMRON :

Méthode de mesure : Oscillométrie

Précision : Tension +/- 3 mmHg Pouls +/- 5% du résultat **Fourchette de mesure** : SYS / DIA : 0 - 299 mmHg Pouls : 40 à 180 battements / mn **Gonflage** : automatique contrôlé **Dégonflage** : dégagement automatique de l'air par valve Affichage des valeurs sur grand écran LCD : systole, diastole, pouls et indicateur d'hypertension Détecteur de pulsations irrégulières (arythmie) Une échelle graduée vous indique votre niveau de tension par rapport aux préconisations de l'O.M.S. Dimensions : 158 x 123 x 85 mm Alimentation : 4 piles 1,5V type AAA (fournies) Poids : 380g

Télécharger la Fiche Technique

Image not found or type unknown

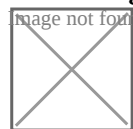

[Lien vers la fiche du produit](#)